

KUBUS

AGITADOR MAGNÉTICO



Agitador magnético con calentador, para realizar disoluciones, incluso de sustancias difíciles de diluir de forma cómoda y rápida. Alternativamente, se puede utilizar simplemente para calentar los contenidos de matraces y botellas de laboratorio de gran capacidad.

Información:

Placa Calentadora: Cerámica

Velocidad agitación: 100-1500rpm

Temperatura máxima calefacción: 340°C

Potencia térmica: 550W

Tecnología: PID permite controlar la temperatura exacta durante el proceso de calentamiento.

Pantalla: LCD que muestra la velocidad real y la programada

Interfaz: RS232 y software gratuito StirPC

Sensor de temperatura: Pt1000 que permite un control a tiempo real (precisión $\pm 0,2^\circ\text{C}$)

Motor: sin escobillas, libre de mantenimiento

Capacidad: 20L, Ø; vasos <135mm; varillas magnéticas de 30 – 80 mm

Incluye: varilla magnética

Dimensiones: 280 x 160x 85 mm

Alimentación: 200-240v/50-60Hz

Grado de protección: IP42 (Din En60529)

ALFOMBRA ANTIDESLIZANTE

Para la recogida de semen



Información:

Alfombra de caucho antideslizante para evitar caídas de los verracos durante el procedimiento de recogida de semen.

Medidas:

100 cm x 150 cm x 2,3 cm

19 kg

2mm Non-slip



ARS HANCOCK STAIN

(P/N HCS-101) - Nigrosina

Información:

La tinción de Hancock (N/P HCS-101) es una tinción de eosina-nigrosina que se utiliza para determinar el número de espermatozoides vivos y muertos en un eyaculado y para analizar las características morfológicas. Los espermatozoides con membranas celulares intactas no absorben la tinción, mientras que aquellos con membranas celulares dañadas sí la absorben y adquieren un color más oscuro.



BALANZA LABORATORIO

SPX - 6Kg - PREC. 1g

Balanza de pequeño formato y gran precisión
Ideal para la comprobación del volumen del eyaculado

Información:

Cap. Max.- 6000gr

Resolución.- 1gr

Dimensiones del plato – 155 x 155 mm

Dimensiones totales – 170 x 250 x 60 mm

Display led con iluminación interna

Peso: 0,626

- Ideal para el pesaje básico en laboratorio.
- Adecuada para la comprobación del volumen del eyaculado.
- Estructura fabricada únicamente en ABS.
- Plato de acero inoxidable.
- Display LED con iluminación interna.
- Equipada con una célula de pesada RX3 muy resistente y fiable.
- Ideal para el envasado y la comprobación de productos, así como para el pesaje general.
- Balanza de bajo perfil, fácil de transportar y de almacenar.
- Alimentación AC o pilas secas (opcionales) de tipo AA 1,5 V para su uso en cualquier lugar.



BALANZA

Para tanque con ruedas

Información:

Cap. Max.- 6000gr

Resolución.- 1gr

Dimensiones del plato – 155 x 155 mm

Dimensiones totales – 170 x 250 x 60 mm

Display led con iluminación interna

Peso: 0,626

- Ideal para el pesaje básico en laboratorio.
- Adecuada para la comprobación del volumen del eyaculado.
- Estructura fabricada únicamente en ABS.
- Plato de acero inoxidable.
- Display LED con iluminación interna.
- Equipada con una célula de pesada RX3 muy resistente y fiable.
- Adecuada para la mayoría de aplicaciones.
- Ideal para el envasado y la comprobación de productos, así como para el pesaje general.
- Estructura resistente y fabricada totalmente en ABS con una célula de pesada RX3 muy precisa.
- Balanza de bajo perfil, fácil de transportar y de almacenar
- Alimentador AC y pilas secas.



BAÑO MARÍA

Digital 25L KUBUS en acero
inoxidable con grifo

Información:

Control de temperatura digital: sistema de regulación de temperatura digital para asegurar una variación térmica de menos de 1°C

Grifo de desagüe: facilita el vaciado completo del baño maría mediante el grifo situado en el frontal del equipo.

Superficie lisa: las resistencias se encuentran ocultas en el interior del baño lo que proporciona una superficie completamente lisa y diáfana.

Fabricado en acero inoxidable: todo el baño está construido en acero inoxidable de grado alimentario.

Especificaciones técnicas:

Temperatura máxima: 70°C

Precisión: 1°C

Material: acero inoxidable

Voltaje: 220V

Potencia: 1200W

Capacidad Máxima: 25L

Tipo de regulación: PID

Medidas: 56x33x24,5 cm

Peso: 9kg



BOARMATE

Spray de feromonas de cerdo 80ml

Información:

Optimiza la detección del momento óptimo para la inseminación.
Vaporizar por un máximo de 2 segundos en la nariz de la cerda.
Envase en spray de 80ml
Permite realizar unas 40 aplicaciones aproximadamente por envase.

- Optimiza la estimulación de la cerda durante la inseminación.
- Mejora la tasa de inseminación.
- Reduce el periodo entre parto y nueva inseminación.
- Mejora la productividad anual de las cerdas.
- Minimiza cerdas fuera de ciclo y “celo silencioso”.
- Aumenta la tasa de partos.
- Ayuda en la inseminación temprana de cerdas primerizas.

BOMBA PERISTÁLTICA

6L/min Pantalla táctil KUBUS



Información:

Bomba peristáltica de 6 L fabricada por KUBUS que permite dispensar de forma rápida y precisa.

Accesorios:

Contrapeso para tubo de silicona – Ref. 3570-001

Cabezal de apertura fácil – Ref. 3570-002

Tubo de silicona #36 para dosificar – Ref. 3570-003

Punta de acero inoxidable – Ref. 3570-004

Ventajas:

Permite ajustar el tiempo de llenado / parada

Caudal ajustable.

Fabricada en acero inoxidable

Hasta 6 litros por minuto para trasvase de diluyente



BLISTER

KUBUS QSBAG 90ml y 60ml

Información:

Cap. Max.- 6000gr

Resolución.- 1gr

Dimensiones del plato – 155 x 155 mm

Dimensiones totales – 170 x 250 x 60 mm

Display led con iluminación interna

Peso: 0,626

Blíster de máxima calidad para el envasado de dosis seminales, fabricado en España.

Formatos: 90 ml y 60 ml

Compatible con diversas máquinas del mercado.

Calidad no espermicida comprobada. Apto para el esperma.



BLISTER

KUBUS QS HANDY 90ml y 60ml

Información:

Cap. Max.- 6000gr

Resolución.- 1gr

Dimensiones del plato – 155 x 155 mm

Dimensiones totales – 170 x 250 x 60 mm

Display led con iluminación interna

Peso: 0,626

BOLSA DE TANQUE

De dilución 100L y 10L (100unds)



Información:

Bolsa especialmente diseñada para la fabricación de grandes volúmenes de diluyente. Sirve a partir de 50L de capacidad en tanques de dilución.

- Capacidad: 100 litros.
- Fondo redondo.
- Gran resistencia.

-Compatible con Tanque de Dilución KUBUS

BOLSA RECOGIDA



Información:

**C/FILTRO 52.5CM- 3 LTS
PAQUETE X 100 UND**



Información:

**C/FILTRO 67.5CM 5 LTS
PAQUETE X 100 UND**

BOMBA DOSIFICADORA

2,5L/min con pantalla táctil



Información:

Bomba peristáltica digital con pantalla táctil fabricada por KUBUS para una mayor rapidez y precisión en la dosificación, con un simple toque de pantalla.

Incluye 4 metros de tubo de silicona, una aguja y un contrapeso.



BOMBILLA LED

PARA MICROSCOPIO (3,5V)



BOMBILLA LED

PARA MICROSCOPIO BA310 (REDONDA)



BOTELLA

DE ALMACENAJE DE 1 LITRO

BOMBILLA INFRARROJOS

ROJA CRISTAL DURO 175W - 240W



Información:

Bombilla infrarrojos de tipo reflector.

Voltaje 240V, Potencia 175 W

Casquillo E27.

Luz roja.

Marca Philips. Cristal duro de alta calidad.

Formato de envío:

Unidades/Caja: 1×12

Peso de la caja: 6kg

BSM-BOAR STUD MANAGER

LICENCIA PERMANENTE + PC + SERVER



Información:

Sistema de gestión de Centros de Inseminación

Software de gestión integral diseñado para centros de inseminación.

Es la solución más completa del mercado para la gestión de recursos y el análisis de datos, maximizando el rendimiento del CIA. Gracias a su sincronización con todas las máquinas, permite una total trazabilidad y rapidez en la elaboración de la dosis seminal.

CABLE CONEXIÓN AMERICANA

A PARED MODELO NEMA IEC C7 NEMA 5-15



CAMÁRA RECUENTO K6

PARA CASA 1X25 KUBUS



Información:

- Cámaras de recuento celular desechables de medidas: 75,2 x 25,2 x 1,0mm
- .6 cámaras de análisis por portaobjetos.
- El estuche tiene 25 láminas portaobjetos por lo que cada caja es para 150 análisis.

La cámara de recuento K6 de KUBUS es una herramienta fundamental para el análisis espermático por sistema CASA o de precisión. Es eficaz para el recuento rápido de espermatozoides y el análisis de motilidad y morfología espermática.



CÁNULA

FLEXIBLE "T" 1X1

Información:

Su diseño optimiza la liberación de la dosis seminal

Facilita el proceso de inseminación (menos resistencia)

Reduce reflujo

Diseño patentado por KUBUS

Formato de envío

Unidades/Caja: 1×1.000

Envases disponibles: 1×1

Medidas de la caja: 83x25x41cm

Peso de la caja: 17 kg

Pallet: 30 cajas. Medidas: 120x80x195 cm

CÁNULA RECTA

KINO DESECHABLE 1 X 100



Información:

Sistema de gestión de Centros de Inseminación

Software de gestión integral diseñado para centros de inseminación.

Es la solución más completa del mercado para la gestión de recursos y el análisis de datos, maximizando el rendimiento del CIA. Gracias a su sincronización con todas las máquinas, permite una total trazabilidad y rapidez en la elaboración de la dosis seminal.




CATÉTER ESPONJA

MULTÍPARA C/TRASERA 1X1

Información:

- La punta de esponja se adapta naturalmente en el cérvix de la cerda de tal manera que permite el paso libre de la dosis seminal y al mismo tiempo evita el reflujo de la misma.
- Los catéteres de Kubus, son elaborados con los polímeros más puros garantizando su calidad.
- Todos nuestros catéteres están diseñados con una trasera universal, que se adapta a cualquier tipo de envase de dosis seminal (tubo, botella o blíster).
- La trasera incluye un tapón que evita la entrada de microorganismos al terminar la inseminación.
- Catéter empleado para la inseminación artificial con deposición cervical.
- Contamos con formatos con cánula montada para inseminación intrauterina.
- Dos tipos de Envase: Pack de 5 catéteres, más económico y Pack individual, para mayor higiene.

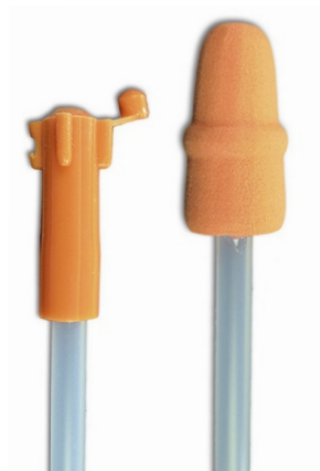

CATÉTER ESPONJA

NULÍPARA C/TRASERA 1X1

Información:

- La punta de esponja se adapta naturalmente en el cérvix de la cerda primeriza de tal manera que permite el paso libre de la dosis seminal y al mismo tiempo evita el reflujo de la misma.
- Los catéteres de Kubus, son elaborados con los polímeros más puros garantizando su calidad.
- Todos nuestros catéteres están diseñados con una trasera universal, que se adapta a cualquier tipo de envase de dosis seminal (tubo, botella o blíster).
- La trasera incluye un tapón que evita la entrada de microorganismos al terminar la inseminación.
- Catéter empleado para la inseminación artificial con deposición cervical.
- Contamos con formatos con cánula montada para inseminación intrauterina.
- Dos tipos de Envase: Pack de 5 catéteres, más económico y Pack individual, para mayor higiene.

COLORANTE LÍQUIDO

120 ml



Información:

Colorante KUBUS - 120ml

Colores:

- Amarillo
- Azul
- Rojo
- Verde



COLORÍMETRO

CON FILTRO 440/680 NM

Información:

Calcula automática y rápidamente la concentración espermática.

- Filtros: 440, 470, 490, 520, 550, 580, 590, 680 nm.
- Rango de lectura: -0,3 to 1,99 A
- Precisión: +/- 0,05 A.
- Reproducibilidad : +/- 0,02 A.
- Lectura en absorbancia o en % de transmisión.
- Para cubetas de 1 cm de paso de luz o tubos de 16 mm.
- Trabaja con red o con batería.
- Dimensiones: 18x15x6 cm.
- Peso: 0,5 kgs.
- Garantía: 2 años.

CONECTOR DATA LONGGER

TESTO 174T - REGISTRADOR DE TEMPERATURA



Información:

Data logger para registro de temperaturas en cualquier lugar. Incluye interfaz USB para programar y leer el registrador de datos.

Rango de medida: -30°C a 70°C
Display digital
16,000 lecturas

CONTRAPESO TUBO

#18 - #25 - #36



CUBETA MACRO

PMMA PARA COLORÍMETRO 280-800 NM-1X100



DILUYENTE DE SEMEN

(MR-A-1L)



Información:

- Permite la conservación del semen de verraco 6-7 días.
- Rápida dilución: se diluye en pocos minutos. Una vez diluido, puede utilizarse inmediatamente, no necesita periodo de equilibración del pH.
- Mayor capacidad de protección de la integridad de la célula espermática.
- Mejora los resultados de fertilidad y prolificidad durante los primeros días de conservación, respecto a los diluyentes clásicos de corta conservación.
- La presencia de buffers de alta calidad en su composición, que ejercen un mayor control sobre las oscilaciones de pH durante la conservación del semen diluido.
- Ayuda a controlar los problemas de aglutinación espermática, disminuyendo la precipitación de proteínas, y favoreciendo el equilibrio en el metabolismo celular.
- Óptimo control del crecimiento bacteriano durante el periodo de conservación del semen.

DILUYENTE

(MR-A ANTIOX)



Información:

MR-A® Antiox ha sido diseñado como herramienta para los centros de inseminación que sufren de variaciones de temperatura a lo largo del año y para aquellos en los que el transporte es un punto crítico para la buena conservación de las dosis seminales.

MR-A® Antiox amortigua los efectos negativos que tienen sobre los espermatozoides los cambios de temperatura y su conservación fuera del rango óptimo de los 16-17°C.

A nivel de laboratorio, **MR-A® Antiox** destaca por su capacidad para mantener estable durante más tiempo la motilidad inicial de los espermatozoides y la integridad de las membranas de los acrosomas, especialmente en situaciones de estrés celular.

En su composición se encuentra un combinado de varios antioxidantes cuidadosamente escogidos para la protección de las estructuras y metabolismo del espermatozoide.

DISOLUCIÓN PATRÓN

DE CONDUCTIVIDAD X 500 ML



ECOGRAFO WIRELESS W3



Información:

Sonda de ecógrafo Wireless para Diagnóstico de Gestación y medición de Grasa Dorsal. Evita el engorroso cable durante el trabajo en granja. Indicado para diagnóstico reproductivo en Porcino, Ovino y Caprino.

El ecógrafo wireless W3 es un sistema de ultrasonido de alta calidad que se puede conectar al Smartphone o PC Tablet. Ofrece imágenes de alta calidad ya que tiene un transductor de ultrasonidos mejorado durante décadas de experiencia e innovación para la generación de este tipo de imágenes. Sin cables lo que facilita el trabajo y el movimiento entre los animales, evitando tirones del cable, causa más común del ruptura de los ecógrafos en granja.

ESTUFA ESTERILIZACIÓN

DIGITAL 80L



Información:

Características:

Cámara Interior: Fabricada en acero inoxidable de alta calidad con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza y cumplir con normas de higiene.

Exterior: Acero laminado en frío con recubrimiento de pintura epoxi electrostática, resistente a la corrosión.

Puerta: Incluye una ventana de visualización de doble vidrio templado para monitorear las muestras sin perder calor.

Bandejas: Incluye 2 rejillas ajustables en altura.

Seguridad: Cuenta con un sistema de protección contra sobrecalentamiento que corta la energía si la temperatura excede el límite programado.

Capacidad: 80 Litros.

Rango de Temperatura: Ambiente +5°C hasta 250°C o 300°C (dependiendo de la resistencia instalada).

Lectura Dual: Pantalla LED superior para la temperatura real y pantalla inferior para la temperatura programada (Set Point). **Funciones de Alarma:** Avisos sonoros por desviación de temperatura o fin del ciclo de tiempo. **Auto-ajuste:** Función de sintonización automática para optimizar la precisión del calentamiento según la carga.



FRASCO DE LAVADO

DE 1L

Información:

Frasco lavador, esencial en cualquier laboratorio o lugar de trabajo que haya que dispensar líquidos con precisión, sin necesidad de abrir o desenroscar tapones.

- **Sencillo**
- **Bajo coste**



GEL LUBRICANTE

DE 5 LITROS

Información:

Lubricación eficaz para la introducción vaginal suave del catéter.
Elimina el riesgo de erosión por sequedad.
No espermicida.

Físico-Química: pH 4,0 – pH 5,0

Viscosidad: (LVT, 3rpm, 22°C): 15.000 – 30000mPas's

Ingredientes Activos: 8-Hydroxyquiloline (CAS 134-31-6)

Caducidad: 3 años después de fabricación

GEL LUBRICANTE

BOTELLA ABREFÁCIL 90ml



GOMA DE SILICONA

PARA SELLADORA MANUAL



GRADILLA ALUMINIO

EN ZETA TUBOS 16MM



Información:

Gradilla en Z de aluminio con capacidad para 50 tubos con diámetro de 12mm. Esencial para mantener erguidos los tubos durante el trabajo, almacenaje o hervir en baño maría.

Capacidad: 50 tubos

Diámetro tubos compatibles: 12mm / 14,5mm

Material: aluminio

GRADILLA

PARA SELLADORA DE 6 TUBOS



HEATSPERM PLACA CALENTABLE

KUBUS 26 TUBOS Y PORTAOBJETOS 270X13



JARRA MEDIDORA

PP 3000ml - PP 5000ml



Información:

Comodidad: Asa para mayor facilidad de movimiento y pitorro para dispensar con mayor facilidad y reducir vertidos.

Precisión: Graduado para medir con mayor precisión.

Durabilidad: Fabricado con plástico de polipropileno, resistente a golpes y autoclavable.

Formatos disponibles: 3000mL (1×6), 5000mL (1×4)

KUBUS DISPENSER



Dispensador inteligente de diluyente fabricado por KUBUS. Permite dispensar de manera rápida y precisa la cantidad de diluyente necesaria directamente desde el tanque de dilución.

Información:

Características técnicas:

- Voltaje: 220V y 110V
- Velocidad máxima: 6000 ml/min
- Potencia: 300W
- Umbral de carga: 20g-23.000g
- Carga con precisión la cantidad de diluyente deseada desde el tanque de dilución.
- Sistema totalmente automatizado.
- Sin necesidad de usar pedal.
- Fácil limpieza.
- Caudal máximo de 6 litros por minuto.
- Cabezal de carga rápida de tubos.

• Composición KIT:

Controlador Dispenser
Bomba digital Kubus de 6L/min
Balanza industrial de precisión
Soporte con pinzas de laboratorio
Tubo de silicona

KUBUS DISPENSER

1000 ML - 2000 ML - 3000 ML



Información:

- Volúmenes variados: Acepta una amplia gama de volúmenes de líquidos, usando el matraz apropiado.
- Preciso: graduado para medir volúmenes grandes utilizando las marcas.
- Eficiencia: compatible con agitadores magnéticos para realizar mezclas en las mejores condiciones.
- Durabilidad: fabricado en vidrio de borosilicato.

MEDIDOR DE GRASA

LEAN-METER RENCO



Información:

Batería recargable de níquel. Vida 2-4 años. 1000 cargas
 Pantalla 2 dígitos para espesor y 1,2,3 para 3 capas de medida
 Opera 6-10 horas a plena carga. Recarga 12-14 horas
 Cargador de batería 115 V o 230 V
 Tamaño 18x7x2.5 cm
 Peso 340 g. Peso embalado 850 g
 Sonda sin cable
 Bloque para calibración

METROSPERM



Información:

Colorímetro para determinar la concentración del eyaculado o las dosis seminales y calcular el número de dosis a realizar de un eyaculado.

- Accesorios:
3485-001 Metroperm – Sonda de repuesto
3485-002 Metroperm – Cable



MICROSCOPIO

BINOCULAR 1820 LED A BATERIAS

Información:

- Sistema óptico: finito, 160mm.
- Cabezal: binocular.
- Oculares: inclinados 45° giratorio 360° gran campo WF10X/18 mm.
- Portaobjetivos: quadruple.
- Objetivos: acromáticos DIN 4X, 10X, 40X.
- Enfoque: coaxial macro y micrométrico.
- Condensador: Abbe 1,25 AN enfocable.
- Platina: mecánica con mandos coaxiales.
- Diafragma iris.
- Iluminación: LED con control de iluminación.
- Funda protectora.
- Alimentación: 110-220V o baterías recargables.
- Garantía: 5 años en componentes ópticos y mecánicos.



MKS PRO SONDA

CONVEXA PARA ANDROID Y CONEXIÓN C

Información:

ESPECIES DE DESTINO:

Caninos y felinos.

Los escáneres MKS, con una calidad de imagen mejorada, tecnología de sonda premium y formación de haz avanzada, con ajustes preestablecidos dedicados para animales, están diseñados para proporcionar imágenes confiables para animales pequeños, medianos y grandes, brindando más confianza en el diagnóstico.

El ecógrafo MKS Pro está diseñado para la evaluación reproductiva de precisión, evaluación de grasa dorsal y profundidad de músculo. MKS Pro es un equipo versátil compatible con una variedad de sondas multipotencial para visualizar con la definición más alta estructuras en los ovarios, evaluación del ciclo estral, así como en la toma de medidas obstétricas.



MKS PRO SONDA

MICROCONVEXA PARA ANDROID Y CONEXIÓN C

ESPECIES DE DESTINO:
Porcinos y ovinos.



MKS PRO SONDA

RECTAL PARA ANDROID Y CONEXIÓN C

ESPECIES DE DESTINO:
Bovinos y equinos.

NEVERA CONSERVACIÓN

KUBUS SPERM CARE 130L 110V



Información:

Nevera de conservación de 130 litros de capacidad y de alta estabilidad térmica. Diseñado específicamente para la conservación de dosis seminales.

Controlador de temperatura digital integrado. Diseñado para garantizar la estabilidad térmica.

Testado para la conservación las dosis seminales porcinas 16-17°C (61-62 °F), con una variación inferior a 1°C.

Amplio almacenamiento, capacidad de 130 litros, para almacenar dosis en blíster, botellas o tubos.

Interior diseñado para fácil limpieza, evitando los focos de contaminación.

Lámpara LED interior que permite una adecuada iluminación sin generar calor.

NEVERA TRANSPORTE

110V - 35L



Información:

Nevera de transporte para dosis seminales con capacidad de 14L

Capacidad: 14 L

- Medidas Int: 200 x 300 x 260 mm
- Medidas Ext: 300 x 450 x 330 mm
- 12V DC

OCSA PREMIUM LICENCIA

PERMANENTE + CÁMARA + MICROSCOPIO + PC



Información:

OCSA® proporciona información precisa, objetiva y repetible de las características de las células espermáticas.

En el Sistema Computarizado de Análisis Seminal (CASA), que permite valorar de forma rápida y fiable la calidad espermática, evaluando concentración, motilidad, aglutinación y morfología.

Big Data online, el programa aprende con la experiencia común. mejorando la red neuronal mediante AI. Software cercano a la investigación al alcance de producción.

Detecta correctamente las gotas proximales y las aglutinaciones. Los CASA actualmente en el mercado, no son capaces de reconocerlos, teniendo que corregirse de manera manual. OCSA® los detecta y los corrige automáticamente.

Permite establecer límites de umbral, por código de color, Facilitando la comprensión y el análisis de resultados y el programa genera reportes descargables en formato PDF y Excel.

OCSA - PEDAL



OCSA - BSM ROLLO

ETIQUETA CONTINUO 50MM



PINZA GRANDE

ESTRANGULADORA DE TUBO DE SILICONA



Información:

- Para cerrar cualquier tipo de bolsa.
- Largo: 9,5 cm.
- Material plástico.

PINZA PEQUEÑA

ESTRANGULADORA DE TUBO DE SILICONA



PLACA CALENTABLE

DIGITAL KUBUS



Información:

Placa calentable digital fabricada por KUBUS. Alta capacidad de carga en la bandeja y fabricado con materiales resistentes, que ofrece máxima estabilidad, precisión y durabilidad.

Máxima estabilidad: la temperatura se mantiene estable durante todo el trabajo con un margen inferior a 1°C.

Materiales resistentes: construcción sólida y robusta en acero preparada para el trabajo diario.

Alta precisión: temperatura regulable hasta 70°C con resolución de 0.1°C.

Superficie de gran capacidad: con revestimiento en color negro y una capacidad de hasta 23 portaobjetos.

POTRO AUTOMÁTICO

Spermatic para recogida de semen - Manos Libres



Información:

Gane en Productividad

Diseñado para recoger de 8 a 10 verracos por operario/hora.

Máximo confort para el verraco.

Superficie antideslizante

Recubierto con una resina muy resistente.

Acero inoxidable.

Brazo de recogida automática ajustable.

Auto-ensamblable.

Altura regulable.

Rail y soporte de vagina incluidos.

Soporte de apoyo para el termo de recogida.

Tamaño:

Largo: 1,160 mm

Ancho: 400 mm

Alto: 400-690 mm

Peso: 50 kg



PROBETA

CRISTAL 250 ML

Información:

Probeta de cristal superior, fabricado con cristal de borosilicato de calidad superior y calibrado, dando lugar a un producto superior a nivel precisión frente a otros similares. Suministrado en un volumen de 250ml, ideal para mediciones pequeñas, como para escalar a mayores.

Fabricación: cristal de borosilicato de máxima calidad y calibrado

Precisión: graduado para mayor fiabilidad en las medidas

Volumen: 250ml, altamente versátil y preciso.

PUNTA DE LLENADO

PARA QS1000



PUNTA DE LLENADO

PARA TUBO #18



QS HANDY LLENADORA

Selladora manual blister KUBUS



Información:

Especialmente diseñada para envasar blisters manualmente de forma rápida, limpia y muy efectiva.

Sella 4 blisters a la vez. Ideal para trabajar con blisters precortados.

Muy fácil de usar, colocar la jarra con el eyaculado en la balda superior y con ayuda de la pinza para abrir el tubo y cerrarlo con máxima diligencia y una punta que minimiza el goteo.

QS 1000 ENVASADORA Y LLENADORA AUTOMÁTICA



Información:

Máquina de blíster fabricada por KUBUS que permite realizar todo el proceso: llena, sella, corta y etiqueta los blísters

1000 dosis cada hora

- Capacidad: 1000 blíster/hora
- Hasta 100ml por blíster
- Materiales: acero y fibra
- Idiomas: multilinguaje
- Tensión: 220V
- Potencia: 250W
- Medidas: 800x880x750mm
- Peso: 80kg
- Utiliza Windows 10 Pro
- Control mediante PLC
- Funcionamiento neumático mediante aire comprimido

QS 500

MÁQUINA LLENADORA Y SELLADORA AUTOMÁTICA BLISTER



Información:

- Pantalla PLC táctil
- Interfaz de usuario fácil de utilizar
- Control de procesos mediante sistema neumático
- Sensorización óptica y láser para procesos de corte y llenado
- Posibilidad de calibración de llenado

Máquina de blíster fabricada por KUBUS que permite llenar, sellar y cortar blisters
Envasa 500 dosis cada hora



RESPUESTO PARA CORTACOLAS



RESISTENCIA ELÉCTRICA

PARA SELLADORA HAWO 1 METRO



RESISTENCIA TEFLÓN

PARA QS HANDY X UND

SELLADORA HAWO

6 « 8 TUBOS (ACERO INOX)



Información:

Selladora automática de tubos para dosis seminales.
Capacidad de soldadura: 440mm, 6-8 tubos.

Tiempo de soldadura: 1 – 10 segundos.

Tiempo de enfriado: 1 – 10 segundos.

Medidas: 63 x 59 x 41 cm, 20 kg, 640 W, 230 V/50 Hz

Tensión circuito abierto resistencia – 20 V AC

Ajuste altura gradilla: 35 mm. Válida para tubos de distintos tamaños.

Potencia: 640 wátios

Accesorios:

3675-002 Resistencia para selladora Hawo / Resistance for Hawo automatic tube sealer

3675-001 Teflon para selladora Hawo / Teflon for Hawo automatic tube sealer.

SET DATA LOGGER TESTO

174H - REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD



Información:

Es un dispositivo electrónico autónomo que mide y almacena variables físicas (temperatura y humedad)

Memoria para 16.000 valores de temperatura y humedad.
Medición fiable con el sensor de humedad estable a largo plazo.
Transmisión de datos sencilla por cable USB, práctica evaluación de los datos y documentación en el PC.
Software ComSoft Básico para descarga de datos y configuración del equipo.

SET DATA LOGGER TESTO

174T - REGISTRADOR DE TEMPERATURA



Información:

Data logger para registro de temperaturas en cualquier lugar. Incluye interfaz USB para programar y leer el registrador de datos.

Rango de medida: -30°C a 70°C

Display digital

16,000 lecturas



TABLET 10 MKS

PRO CON FUNDA ANTIGOLPES



TABLET 7 W3

CON FUNDA ANTIGOLPES



TABLET 8 W3

CON FUNDA ANTIGOLPES

TANQUE DILUCIÓN

KUBUS 100L



Información:

- Gran Formato: capacidad de dilución de hasta 100 litros de diluyente.
- Regulación PID: el control de temperatura de tipo PID (Proporcional Integral Derivativo) es el método de regulación térmica de mayor estabilidad y que asegura una precisión de menos de 0,5°C.
- Agitación Magnética: sistema de agitación sin contacto de fácil limpieza y evita focos de contaminación.
- Fabricado en Acero Inoxidable: cuerpo completo en acero AIS 304L en acabado pulido espejo.
- Encendido Programable: posibilidad de programar el encendido del equipo para obtener la temperatura óptima al comienzo de la jornada laboral.

TAPÓN C/ALETAS

TRANSPARENTE PARA TUBO ENSAYO 3ML 1x1000



TERMO RECOGIDA

500ML



Información:

Termo para recogida de semen

•

- Capacidad para vasos de 500 ml
- Diámetro interno: 8,2 cm
- Altura interior: 12,5 cm
- Recipiente de plástico resistente
- Fácil limpieza y desinfección
- Caja 1 x 6 52 x 34 x 29,5 cm, 4,9 kg

TUBO DE SILICONA #36

PARA DOSIFICAR 1M - CABEZAL BOMBA PERISTALTICA 6L/MIN



TUBO DE SILICONA #18

1 METRO



VARILLA MAGNETICA DIAM 8

LONG 38 (5 UNIDADES)



Información:

Varillas magnéticas para uso con agitadores magnéticos para diluir sólidos en líquidos, o mezclar eficientemente líquidos en líquidos.

Diámetro: 8mm

Longitud: variable

13 mm

28 mm

38 mm

75 mm

Recubrimiento: PTFE

5 unidades